




TECHNIMOUNT
EMS®

SAFETY ARM SYSTEM® 600

SYSTÈME DE FIXATION POUR CIVIÈRE FERNO® POWER X2™

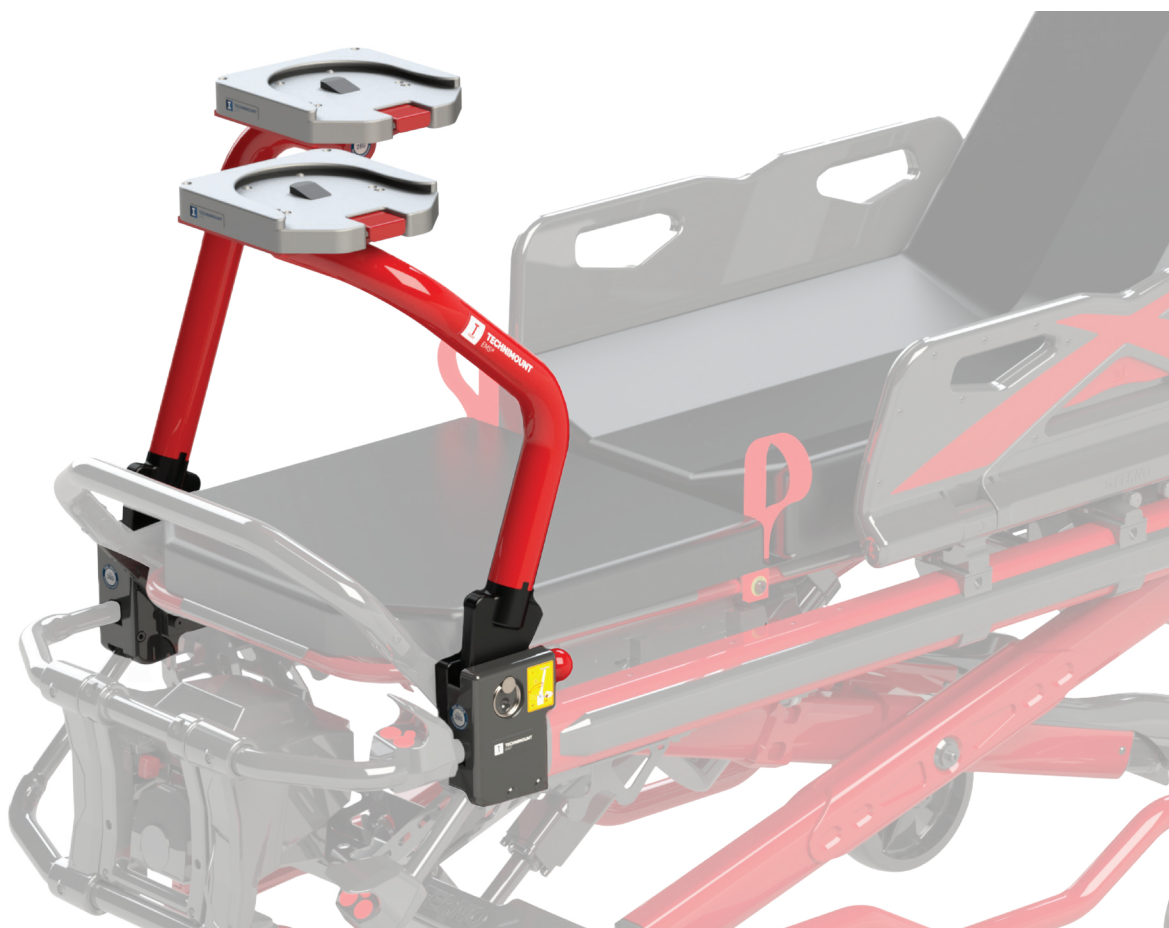

SÉCURITÉ ET FLEXIBILITÉ
LÀ OÙ C'EST IMPORTANT


SAFETY ARM SYSTEM® 600

Composantes du produit

Le Safety Arm System® 600 permet de fixer en toute sécurité des appareils médicaux sur une civière FERNØ® POWER X2™ lors du transport terrestre de soins médicaux d'urgence. Dotée de la Base de Fixation Standard de Technimount, cette solution est compatible avec tous les produits Bracket Pro Serie® équipés du disque inférieur standard.

Conçu pour offrir une grande flexibilité, le Safety Arm System peut être facilement abaissé ou complètement retiré pour l'entretien en libérant la goupille de verrouillage. Pour les équipes qui utilisent plusieurs appareils médicaux, la version angulaire permet d'installer simultanément deux bras sans qu'ils n'interfèrent l'un avec l'autre.

Cette solution de fixation est testée en conformité avec les normes les plus élevées de l'industrie pour assurer le transport sécuritaire des appareils médicaux.

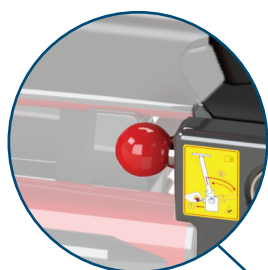

Goupille de sécurité



Base de Fixation Standard



Goupille de verrouillage



Bloc d'ancrage



SAFETY ARM SYSTEM® 600

Points clés

CARACTÉRISTIQUES ET BÉNÉFICES

- Assure le transport sécuritaire et efficace des appareils médicaux sur les civières, pour améliorer les soins aux patients et la gestion des appareils.
- Équipé de la Base de Fixation Standard de Technimount afin de permettre l'interchangeabilité des appareils médicaux.
- Réduit les risques de dommages aux équipements.
- Les bras peuvent être facilement abaissés afin de faciliter les transferts latéraux des patients en tirant sur la goupille de sécurité.
- Les bras peuvent être facilement retirés pour l'entretien en libérant la goupille de verrouillage.
- L'installation du Bloc d'ancrage préserve l'intégrité de la civière.
- Testé en conformité avec la norme de sécurité la plus élevée de l'industrie pour le transport terrestre des appareils médicaux, SAE J3043.

Configurations possibles




SAS droit seulement



SAS droit et angulaire

Mécanisme du bras

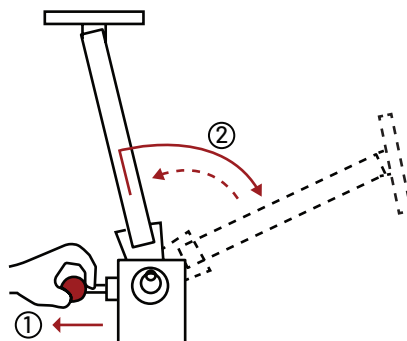

SAFETY ARM SYSTEM® 600

Spécifications techniques

Nom du produit	Safety Arm System® 600 & SAS Bloc d'ancrage X2
Description	Système de fixation permettant de sécuriser des appareils médicaux sur les civières FERNO POWER X2 lors du transport terrestre des SMU. Bloc d'ancrage pour civière FERNO POWER X2 : - Ferno X2 410-10-FX2 – Bloc d'ancrage (côté droit FERNO POWER X2) - Ferno X2 410-10-FX2-LFS – Bloc d'ancrage (côté gauche FERNO POWER X2)
Code de produit	Safety Arm System® 600 : - Ferno X2 410-20-UN – Bras standard (côté droit) - Ferno X2 410-20-UN-LFS – Bras standard (côté gauche) - Ferno X2 410-20-UN-ANG – Bras angulaire (côté droit) - Ferno X2 410-20-UN-LFS-ANG – Bras angulaire (côté gauche)
Environnement d'opération	EMS / CCT (transport terrestre)
Conformité	Testé en conformité avec les normes SAE J3043
Civière compatible	FERNO® POWER X2™
Système de fixation compatible	Base de Fixation Standard
Dimensions (L X P X H)	- Bloc d'ancrage : 102 x 64 x 138 mm (4 x 2,5 x 5,4 po) - Bras standard : 264,2 x 271,8 x 510,5 mm (10,4 x 10,7 x 20,1 po) incluant la Base de Fixation Standard - Bras angulaire : 226,16 x 297,2 x 510,5 mm (8,9 x 11,7 x 20,1 po) incluant la Base de Fixation Standard
Poids	- Bloc d'ancrage : 1,7 kg (3,8 lb) - Bras standard : 2,54 kg (5,6 lb) incluant la Base de Fixation Standard - Bras angulaire : 2,62 kg (5,78 lb) incluant la Base de Fixation Standard
Composition	Aluminium, acier inoxydable et plastique
Charge Maximale d'Utilisation (CMU)	- Bloc d'ancrage : 15,87 kg (33,7 lb) - Safety Arm System 600 : 13,6 kg (30 lb)
Température de fonctionnement	-31 °F à 113 °F (-35 °C à 45 °C)
Options	Pour plus d'information communiquez avec Technimount EMS à l'adresse customerservice@technimount.com



technimount.com

Bracket Pro Serie, Technimount EMS sont des marques déposées de Technologies CGC Inc.

Tous les noms de produits et de sociétés de dispositifs médicaux sont des marques commerciales™ ou des marques déposées® de leurs détenteurs respectifs.

© 2026 Gestion Technimount S.A.M.U. Inc. – Tous droits réservés – Imprimé au Canada

BR-SAS600-202609FR-01