

SYSTÈME DE FIXATION CONÇU POUR LE MONITEUR/ DÉFIBRILLATEUR ZOLL ZENIX[®]







SÉCURITÉ ET FLEXIBILITÉ LÀ OÙ C'EST IMPORTANT

Composantes du produit

Le Bracket Pro Serie® 27-FL est spécialement développé pour sécuriser le moniteur-défibrillateur ZOLL Zenix® lors des transports terrestres en soins critiques et services médicaux d'urgence. Conforme à la norme 14 CFR 23.561 & 23.561 & 27.561 & 29.561, il protège patients et équipes de soins tout en réduisant les risques de dommages à l'équipement.

Offrant une flexibilité maximale au personnel SMU, il peut être utilisé avec ou sans les sacs d'accessoires ZOLL®. Grâce à son disque inférieur standard, il est entièrement compatible avec les systèmes de fixation Technimount munis d'une base de fixation standard, permettant un positionnement optimal.

Équipé d'une poignée avant, le système de fixation permet une installation et un retrait fluides de sa base, tout en facilitant la rotation contrôlée de l'appareil pour une visibilité optimale de l'écran et une surveillance continue du patient pendant le transport. Son empreinte compacte et sa conception légère assurent une exécution efficace des protocoles pour les équipes EMS.



Points clés


CARACTÉRISTIQUES ET BÉNÉFICES

- Testée en conformité avec les normes de sécurité les plus rigoureuses de l'industrie pour le transport sécuritaire des appareils médicaux, 14 CFR 23.561 & 23.561 & 27.561 & 29.561.
- Compatible pour une utilisation avec ou sans les sacs d'accessoires du ZOLL®, permettant au personnel SMU de poursuivre leurs protocoles habituels.
- Préserve l'intégrité de l'appareil médical, assurant un accès complet aux connecteurs, au câblage et aux interfaces en tout temps.
- Conception légère permettant d'augmenter l'ergonomie lors des protocoles de soins.
- Équipé d'un disque inférieur standard, pour une installation facile sur les civières, comptoirs ou supports muraux.
- Poignée avant permettant une installation ou un retrait rapide de sa base de fixation standard
- Optimisation de l'espace à l'intérieur de l'aéronef ou de l'environnement de soins grâce à son empreinte compacte.
- Pieds en acétal durables assurant une stabilité sur toute surface plane.
- Matériaux hautement résistants adaptés aux environnements exigeants des services médicaux d'urgence.

CONFIGURATIONS POSSIBLES



Wall Mount Pro - FL

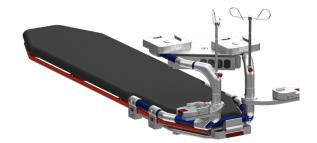

Xtension Pro Assistant - LP



Base de fixation standard

Spécifications techniques

Nom du produit	Bracket Pro Serie 27 - FL
Description	Support de fixation conçu pour sécuriser et déplacer un moniteur/défibrillateur ZOLL Zenix, avec ou sans ses sac d'accessoires
Code de produit	160-10-ZZ-FL
Environnement d'opération	SMU/SC (aérien)
Conformité	 Testé en conformité avec 14 CFR 23.561 Testé en conformité avec 14 CFR 25.561 Testé en conformité avec 14 CFR 27.561 Testé en conformité avec 14 CFR 29.561
Civière compatible	N/A
Système de fixation compatible	 Base de Fixation Standard Base de Fixation Allongée Base de Fixation Universelle Safety Arm System
Appareils médicaux/ accessoires compatibles ou équivalent	Moniteur/défibrillateur ZOLL Zenix avec ou sans sacs d'accessoires
Dimensions (L X P X H)	Bracket Pro Serie 27 - FL: 254,25 mm X 211,58 mm X 72,39 mm (10,01 po X 8,33 po X 2,85 po) - Avec l'appareil médical: 298,45 mm X 222,25 mm X 273,05 mm (11,75 po X 8,75 po X 10,75 po) - Avec l'appareil médical et (2) petits sacs d'accessoires: 448,31 mm X 251,97 mm X 323,85 mm (17,65 po X 9,92 po X 12,75 po) - Avec l'appareil médical et (2) gros sacs d'accessoires: 660,4 mm X 262,89 mm X 323,85 mm (26 po X 10,35 po X 12,75 po)
Poids	0,98 kg (2,16 lb)
Composition	Aluminium et plastique
Charge Maximale d'Utilisation (CMU)	9,98 kg (22 lb)
Température de fonctionnement	- 35° C à 45° C (- 31° F à 113° F)
Options	N/A

